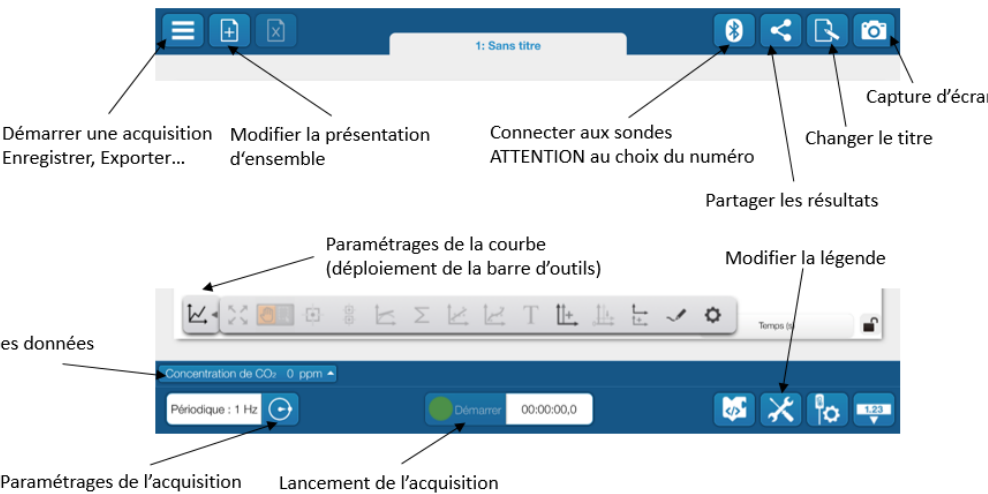
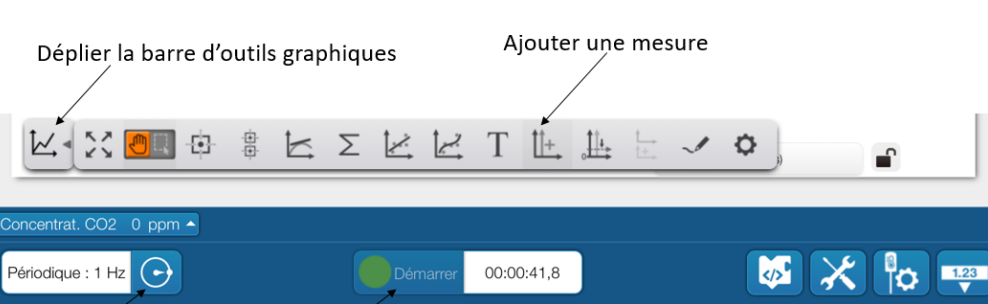

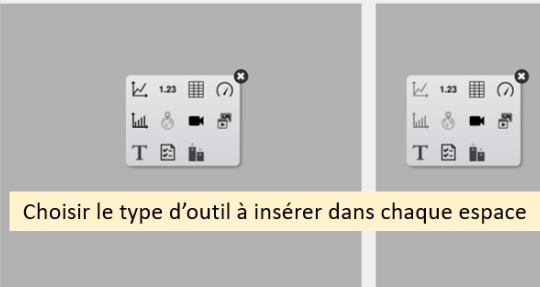


EXPÉRIMENTATION ASSISTÉE PAR ORDINATEUR AVEC SPARKVUE

L'interface contenant les sondes se connecte en Bluetooth par les « Réglages » de l'IPad / Bluetooth. **Attention** au choix du numéro.

Menu général du logiciel	Paramétrer une acquisition
 <p>Annotations for the main menu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Démarrer une acquisition Enregistrer, Exporter... Modifier la présentation d'ensemble Connecter aux sondes ATTENTION au choix du numéro Changer le titre Capture d'écran Partager les résultats Paramétrages de la courbe (déploiement de la barre d'outils) Modifier la légende Modifier les données Concentration de CO₂ 0 ppm Périodique : 1 Hz Démarrer 00:00:00,0 Paramétrages de l'acquisition Lancement de l'acquisition 	<p>Paramétrage du mode de mesurer, des capteurs, de la fréquence des mesures, de la durée de l'acquisition.</p> <p>Modifier l'affichage graphique</p> <p>Modifier les données : possibilité de choisir la couleur de mesure.</p> <p>Roue crantée des paramétrages de la courbe : possibilité de modifier le motif des points de données.</p> <p>Modifier la légende : Gérer les essais / Choisir la série à renommer</p>
Lancer une mesure	Modifier la présentation d'ensemble
 <p>Annotations for the measurement setup:</p> <ul style="list-style-type: none"> Déplier la barre d'outils graphiques Ajouter une mesure Concentrat. CO₂ 0 ppm Périodique : 1 Hz Démarrer 00:00:41,8 Paramétrer l'acquisition Démarrer l'acquisition 	<p>Modifier la présentation d'ensemble</p>  <p>Choisir un modèle</p> <p>Annuler</p>  <p>Choisir le type d'outil à insérer dans chaque espace</p>

